

Solución Wireless

The logo icon consists of three curved lines representing signal waves, with a small orange circle containing the letters 'nx' positioned between the two lines.

Argumentario de ventas

Ibernex Ingeniería SL
www.ibernex.es



Solución Wireless



Colgar, conectar ¡y listo!

Rápido y fácil, pero ofreciendo fiabilidad y precisión. Conectando sin cables para asegurar una óptima comunicación entre el personal del centro y la persona a su cuidado.



Instalación sin obra

Nuestra solución de tecnología RF permite una configuración e instalación fácil y rápida, sin necesidad de obras.



Antibacteriano e impermeable

Ofrecemos productos con materiales antibacterianos y terminales a prueba de agua y polvo, lo que garantiza un entorno seguro y saludable para todos.



Producto flexible y escalable

La capacidad de adaptación y escalabilidad de nuestra solución permite a los centros ajustarla a sus necesidades, sin recurrir a costos adicionales.

BENEFICIOS PARA EL CENTRO

Mejora la comunicación entre el usuario y el personal

Solución portátil, robusta y fácil de usar

Gestión completa de las alarmas


Dos modos: con software o autónomo

Solución ideal para:



- REFORMAS Y REHABILITACIONES BÁSICAS
- CENTROS CON SISTEMAS PREEXISTENTES

PRODUCTOS DE LA SOLUCIÓN

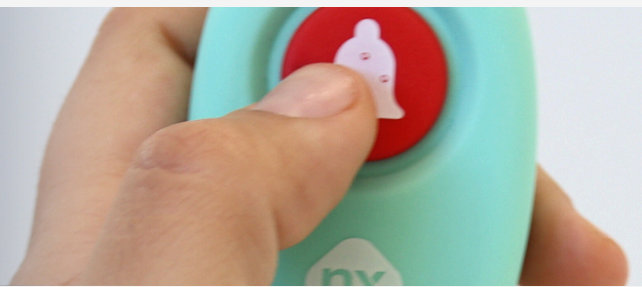

Terminal NX8809

Terminal de cama inalámbrico.

- Incluye adaptador para el pulsador NX8809/C.
- Protección IP54
- Antibacteriano.
- Duración de la batería: 5 años.

Permite la generación y atención de alarmas y comunican con los periféricos.



Terminal NX8809/B

Terminal de baño inalámbrico

- Incluye adaptador para el tirador NX0073 (incluido en la imagen).
- Protección IP65
- Antibacteriano.
- Duración de la batería: 5 años.

Permite la generación y atención de alarmas y comunican con los periféricos.




Pulsador NX8809/C

Pulsador de cama de silicona.

- Botón rojo para llamada.
- Cable adaptador para conectar con el terminal de cama.
- LED (rojo) luminoso.
- Antibacteriano.
- Protección IP66

Periférico para generar un aviso de alarma.

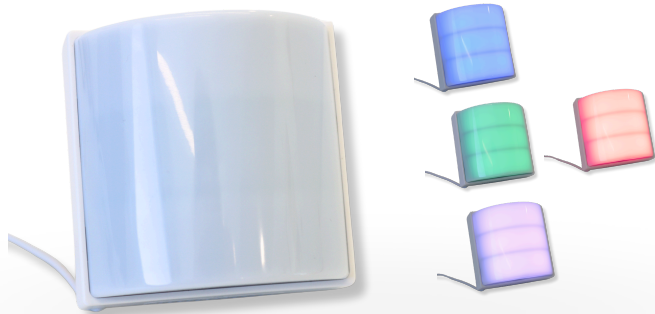

Luz NX8820

Luz de pasillo

- Luz LED de 4 colores.
- Buzzer incorporado.
- Posibilidad de alimentación por pilas.

Permite la notificación acústica y visual en el sistema.

Rótulo NX8834

Rótulo de pasillo

- Panel alfanumérico (LED).
- Informa sobre los códigos de alarmas.
- Alarma acústica.
- Volumen y contraste regulables.

Permite la recepción de los avisos y la visualización de las alarmas.



Receptor NX8833

Receptor portátil de alarmas (pager)

- Recibe alarmas (no cancela).
- Buzzer incorporado.
- Lectura de mensajes.
- Programable.

Permite la recepción de los avisos y la visualización de las alarmas.

Repetidor NX8840



Nos permite extender la cobertura de la Solución Wireless.

Programador NX8852



Permite la programación de forma sencilla

Integrador NX8851



Permite la integración con el software Helpnex de Ibernex.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN



Robustez tecnológica

Tecnología RF: alcance superior, mayor penetración de obstáculos y un consumo de energía reducido, ¡ideal para una conectividad sin límites!

Instalación sin obras ★

Nuestra solución Wireless permite un despliegue “Plug&Play”, sin necesidad de obras para poder llevarla a cabo en tiempos reducidos.

Amplio mercado objetivo

Dirigida a centros residenciales y hospitalarios, donde el cableado tradicional no es viable.

Reformas o centros con soluciones preexistentes que necesiten una solución actual y robusta “Plug&Play”.

Flexibilidad y adaptabilidad ★

Nuestra solución permite a los clientes adaptar gradualmente su infraestructura según sus necesidades, sin interrumpir operaciones diarias ni incurrir en grandes costos.

Integración completa

Se integra perfectamente con nuestra solución de software Helpnex, ofreciendo una funcionalidad completa desde el principio.

Materiales de calidad ★

Con materiales antibacterianos y terminales a prueba de agua y polvo, aseguramos un entorno seguro y saludable para sus trabajadores.




CARACTERÍSTICAS CLAVE

Funcionalidades clave


- **Portabilidad:** capacidad para instalarse o moverse fácilmente.
- **Configuración e instalación fácil y rápida:** no requiere obra.
- **Robustez:** desempeño y calidad totalmente confiable, mínimo 5 años de operación con baterías AAA “long-lasting”.
- **Libre de interferencias:** La tecnología RF no interfiere con otros dispositivos médicos o sistemas electrónicos.
- **Materiales antibacterianos** que facilitan el entorno seguro.
- **Impermeable:** terminales de llamada a prueba de agua y polvo IP65.
- **Perillas de extensión de llamadas con desenganche de seguridad:** el sistema cuenta con alarma de desconexión.
- **Sistema de alarma de desconexión** de terminal de llamada: advertencia acústica y visual en caso de desconexión.
- **Aviso por batería baja.**

Dos modos de funcionamiento

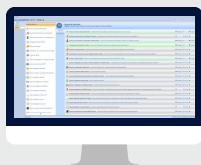

Integración con software Helpnex

- Generación de informes personalizables.
- Trazabilidad y visualización de las alarmas y presencias en tiempo real.
- Acceso a otras soluciones que ofrece el sistema.

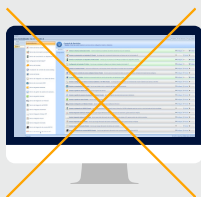

Modo autónomo

- Sistema básico de gestión de alarmas
- Escalable: posibilidad de integración posterior con software.

ARGUMENTARIO PRINCIPAL

La incorporación de la Solución Wireless en el centro va a suponer una mejora en la gestión del mismo debido al incremento de la productividad y el ahorro en costes de operatividad.

- **Ofrecemos un servicio integral**

Garantía de marca Ibernex

- **No se requieren procesos de obra o cableado**

La solución es completamente inalámbrica y modular.

- **Fácil e intuitivo**

Los dispositivos tienen un funcionamiento muy sencillo. Además, tenemos la posibilidad de utilizar el software Helpnex o hacer un uso autónomo.

- **Control preciso sobre cada actividad (modo software)**

El sistema monitoriza las alarmas y las presencias realizadas por el personal, evitando así futuras confusiones y pudiendo medir la eficacia en número de asistencias y tiempos de atención.

- **Permite personalizar la solución a las necesidades del centro**

Genera informes 100% personalizados (modo software).

- **Integración con terceros**

Gracias a la integración con nuestro software Helpnex, podemos integrarnos con otros sistemas de gestión como el HIS o Resiplus evitando duplicidades en el alta de datos y funcionando siempre de manera transparente al usuario.

- **Marca Ibernex**

Empresa con más de 25 años de experiencia en el sector y avalada por una robusta cartera de clientes y red de más de 500 compañías colaboradoras.

- **Ventaja de compra: GARANTÍA**

Ibernex garantiza los productos y equipos que comercializa contra cualquier defecto de fabricación 36 meses a partir de la fecha de entrega.

- **Normativas y estándares**

- ISO9001.
- IATF 16949.
- Mercado CE.



FUNCIONAMIENTO EN 4 PASOS



Emisión de la alarma por parte paciente/residente

El usuario lanza la alarma desde uno de los dispositivos:



Terminal cama



Pulsador de cama



Terminal y tirador de baño



Recepción de la alarma en dispositivos del personal

El personal recibe el aviso de alarma en los dispositivos:



Luz de pasillo



Rótulo de pasillo



Dispositivo portátil



Asistencia y atención de la alarma


El personal acude a atender la alarma y marca la presencia en el terminal



Terminal cama



Terminal y tirador de baño

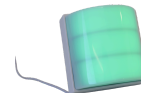

Luz de pasillo



Generación de informes

Gracias al modo de funcionamiento con software Helpnex, podemos ver la trazabilidad y seguimiento de las alarmas generadas y crear informes personalizados.



Solución Wireless

©2018 Ibernex Ingeniería S.L. IBERNEX y HELPNEX son marcas registradas.

Reservados todos los derechos. Esta documentación es meramente informativa, en consecuencia, declinamos cualquier responsabilidad legal sobre su contenido. Especificaciones y apariencia del producto sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.

Este documento es propiedad exclusiva de IBERNEX y está protegido por la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Queda estrictamente prohibida su reproducción, distribución, difusión o cualquier otro uso sin el permiso expreso por escrito de IBERNEX. Cualquier uso no autorizado de la obra será perseguido legalmente.

IBERNEX, C/ Alaún 14 - nave 11, 50197 Zaragoza, España •

Ibernex@ibernex.es

Tel 902 106 730 / +34 976 794 226 // Fax. 902 104 806 / +34 976 233 366 •

www.ibernex.es

